




Controleer bewustzijn - Maak de luchtweg vrij - Controleer ademhaling - Bel 112

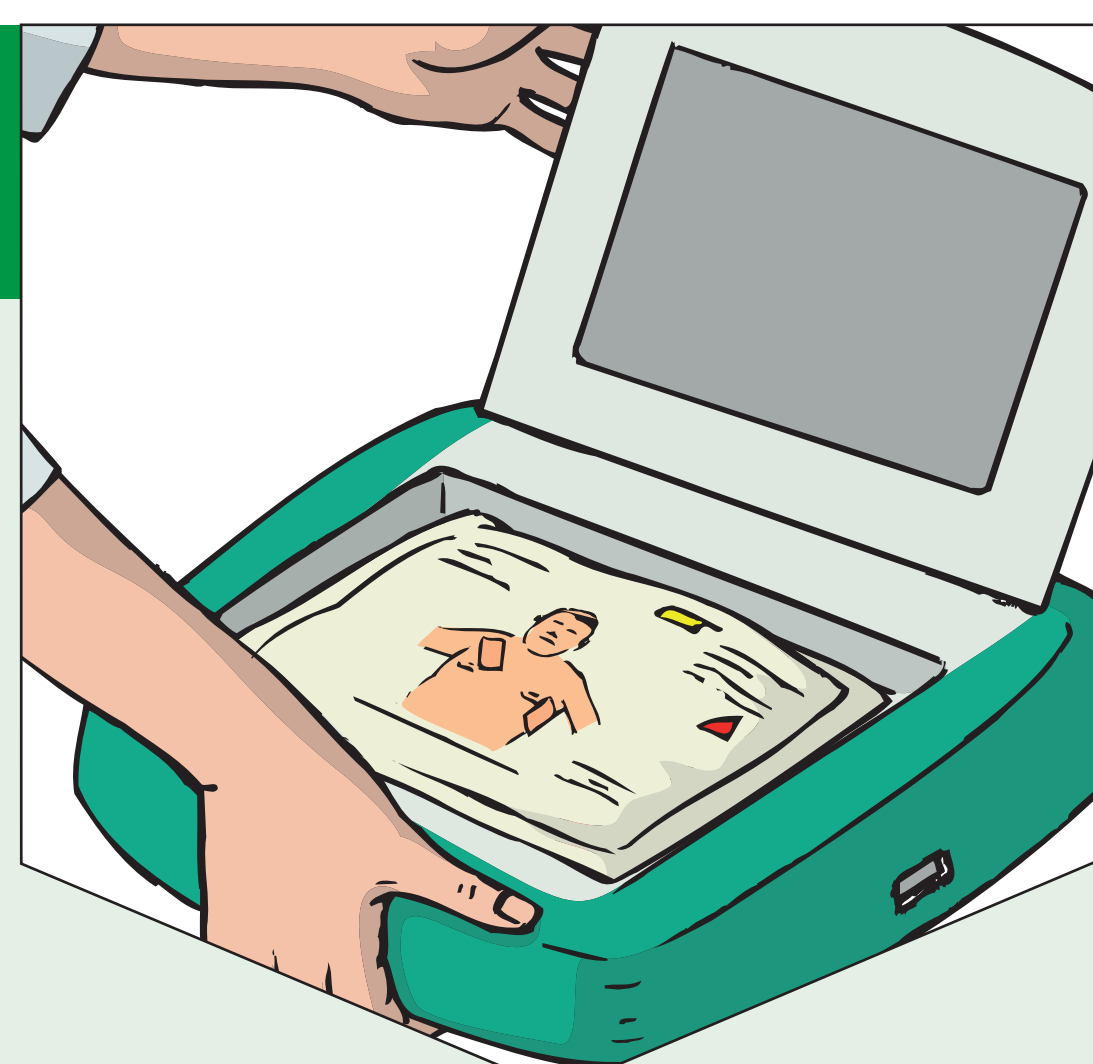


Activeer de AED

Volg de gesproken instructies onmiddellijk op.



Bevestig de elektroden

Breng één elektrode aan onder de linker oksel.
Breng de andere elektrode aan onder het rechter sleutelbeen naast het borstbeen.

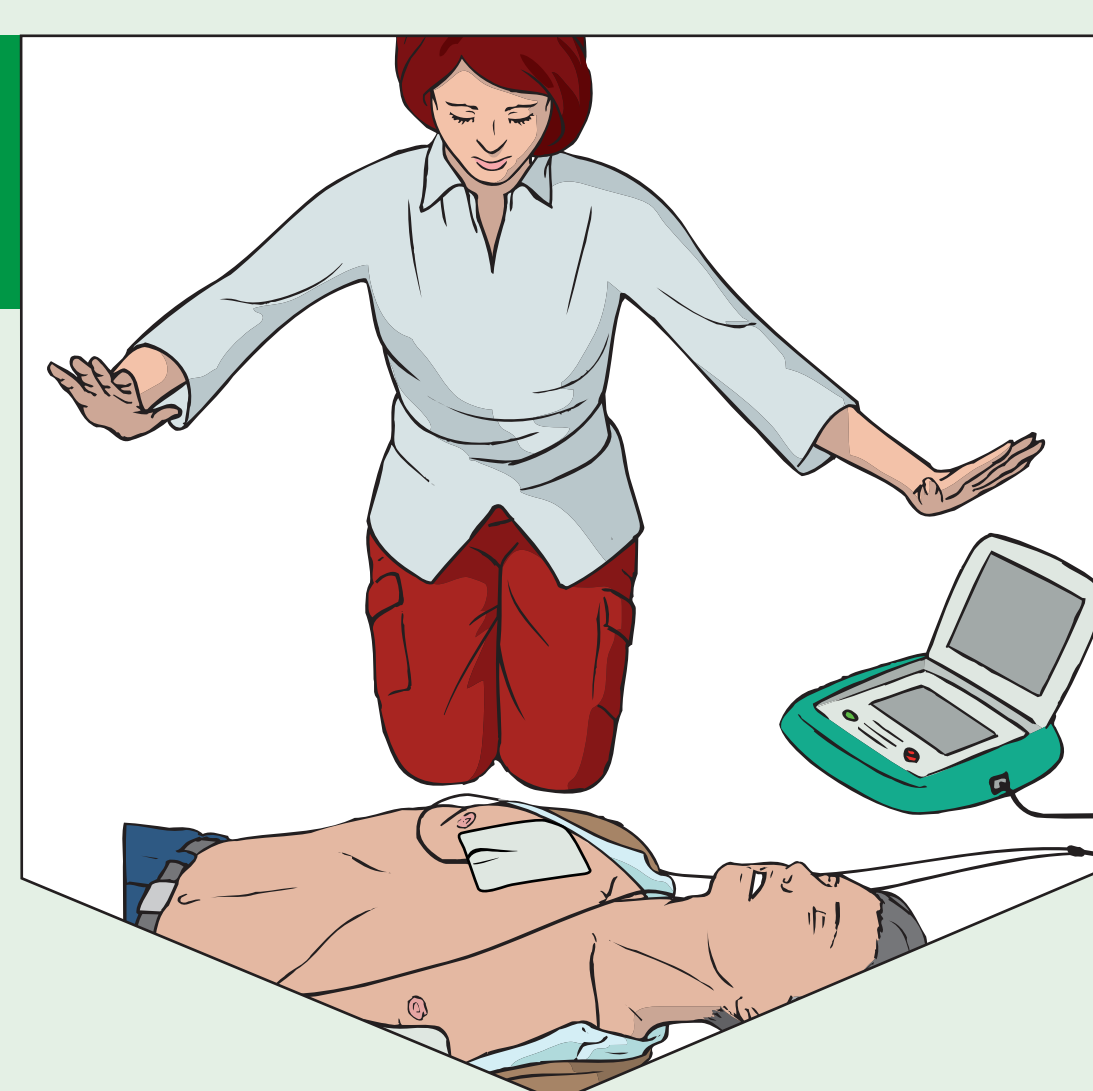

Hou afstand

Zorg ervoor dat niemand het slachtoffer aanraakt terwijl de AED het hartritme analyseert.



Dien de schok toe

Zorg ervoor dat niemand het slachtoffer aanraakt.



Begin onmiddellijk met de reanimatie

Plaats uw handen in het midden van de borstkas.
Geef 30 hartmassages.
Plaats uw lippen rond de mond.
Blijf blazen tot de borstkas omhoog komt.
Geef de volgende beademing als de borstkas neer gaat.
Ga door met reanimeren.



30:2

Volg de gesproken instructies onmiddellijk op.

Stop met de reanimatie indien het slachtoffer normaal begint te ademen. Draai het slachtoffer in de stabiele zijligging indien hij/zij nog steeds bewusteloos is.